



Cosmopor Advance®

Selvklæbende absorptionsforbinding

Cosmopor Advance er en selvklæbende, absorberende forbinding med DryBarrier Technology, hvilket betyder, at sårpudden består af tre forskellige lag, som tilsammen skaber en optimal sårheling. Sårpudden absorberer hurtigt eksudat, som lagres i det øverste lag og beskytter såret mod genvædning. Pudens kontaktflade er belagt med et polyethylenet, hvilket sikrer, at forbindingen ikke fæstner i såret og kan fjernes igen, uden at patienten føler smerte.

DryBarrier Technology



Fæstner ikke i såret

Afrundede hjørner forhindrer, at forbindingen ruller



Indikation

Til postoperativ sårpleje og som steril beskyttelse ved mindre sårskader.

Kontraindikationer:

Ingen kendte.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Cosmopor Advance er en selvklæbende, absorberende forbindelse med DryBarrier Technology.

Egenskaber

Cosmopor Advance er en selvklæbende, absorberende forbindelse til postoperativ pleje samt steril beskyttelse ved mindre sår. Sårpuden består af DryBarrier Technology, hvilket betyder, at sårpuden består af superabsorbante fibre (SAF). Sårpuden opsuger hurtigt eksudat og væske og holder såret tørt. Sårpuden fæstner ikke i såret, og forbindingen kan fjernes, uden at patienten føler smerte.

Materiale

Forbindingen består af non-woven polyester. Sårpuden består af tre forskellige lag. Kontaktlaget har en overflade af polyetylenet, hvilket sikrer, at forbindingen ikke fæstner i såret. Transportlaget består af viskose og medvirker til at absorbere eksudat. Det tredje og sidste lag består af superabsorbante fibre, hvilket bevirker, at forbindingen permanent absorberer store mængder eksudat, samtidig med at det beskytter mod genvædning, selv under tryk. Klæbekanten har en syntetisk baseret klæber, som er fri for kolofonium og latex.


Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse 1, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når forbindingen fikseres.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Cosmopor Advance®	7,2 x 5 cm	901010	25 stk	20 Æsker
Steril, pakket enkeltvis	10 x 6 cm	901011	25 stk	24 Æsker
	10 x 8 cm	901013	25 stk	18 Æsker
	15 x 8 cm	901014	25 stk	12 Æsker
	20 x 10 cm	901015	25 stk	10 Æsker

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

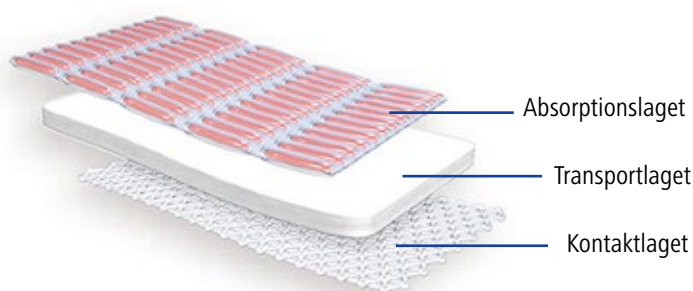

Fordele:

Sikker fiksering

Enkel håndtering

Efterlader ingen klisterrester

Absorberende

Fri for kolofonium og latex

Behagelig at bære