



MoliForm®

Anatomisk formet beskyttelse ved middel til meget svær inkontinens




HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterne absorberer væsken hurtigt og forhindrer uønsket lugt.

Tre-lags absorptionspude med Dry Plus lag

Tre-lags absorptionspuden yder ekstra stabilitet. Dry Plus laget leder hurtigt væsken ind i absorptionskernen og beskytter mod gennemvædning.

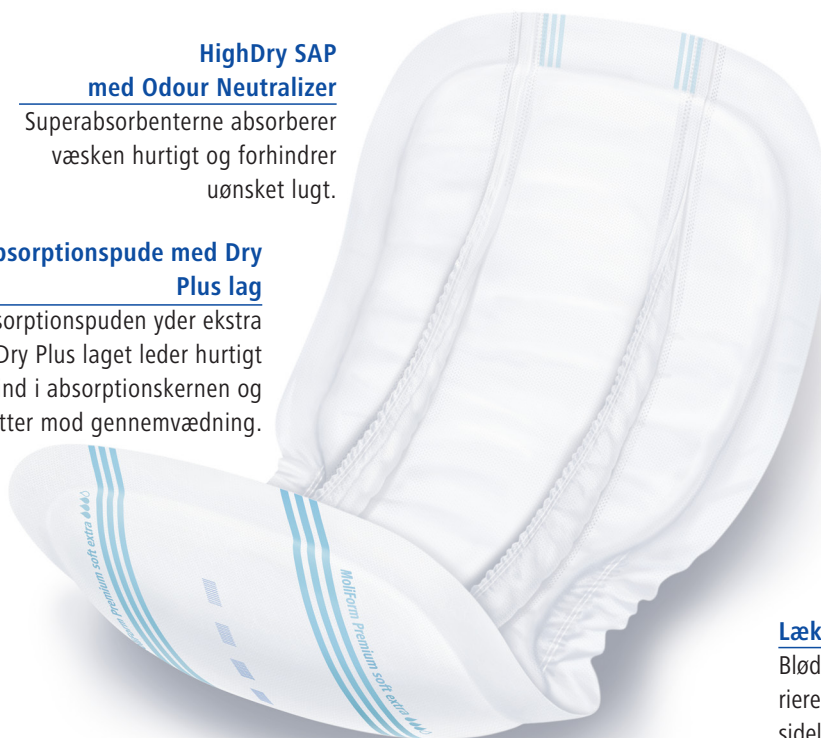

Advanced Dry Zone

Advanced Dry Zone giver en unik følelse af tørhed mod huden. Overfladen er forbedret med 30%*, som selv under tryk hjælper med at opretholde et sundt hudklima.

*Paul HARTMANN AG interne testmetode "Fugte efter ABL"

Lækagebarrierer

Bløde væskeafvisende lækagebarrierer yder en ekstra beskyttelse mod sidelækage.

Vådindikator

En vådindikator på langs af produktets yderside indikerer, hvor stor en del af absorptionspuden som udnyttes.

Diskret yderside

Ydersiden er diskret hvid med pastelfarvede streger, produktnavn og dråbemærkning for at lette valget af det rette produkt.

Tekstilkomfort

Ydersiden af tekstillignende materiale forhindrer platen i at komme i kontakt med huden og bevirker, at det ikke knitrer.

MoliForm er en anatomisk formet inkontinensble, som fikses ved hjælp af en fikseringsbuks. Bleens anatomiske pasform gør den behagelig at anvende, og lækagebeskyttelsen rundt om hele absorptionspuden gør den til et sikkert valg. MoliForm findes i syv forskellige absorptionskapaciteter for at kunne tilbyde den mest optimale beskyttelse uanset lækagens størrelse.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Huginsvej 1F • 3400 Hillerød
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Materiale:

Absorptionspuden: Cellulose og superabsorbenter
Barriereleg : Polypropylen/polyethylen
Overflade: Polypropylen
Elastik: Lycra
Latexfri

Produktet er klassificeret som et medicinsk produkt klasse I, usteril og er CE-mærket som EU-direktiv 93/42/EEC.



PAUL HARTMANN A/S (2011-12)

Fordele:

Advanced Dry Zone

Tekstillignende barriereleg

Lækagebarrierer på langs

Komplet sortiment

Sortiment	Varenr.	Mål	Vægt	Abs.kap. (ISO)	Antal pr. karton
Light	168 118	52,5 cm	51 gr	1 200 ml	4x28 stk
Normal	168 018	62 cm	60 gr	1 350 ml	4x28 stk
Plus	168 218	62 cm	65 gr	1 600 ml	4x28 stk
Extra	168 318	69 cm	96 gr	2 300 ml	4x28 stk
Maxi	168 718	69 cm	101 gr	2 450 ml	4x28 stk
Super	168 918	69 cm	108 gr	2 700 ml	4x28 stk
Super plus	168 619	69 cm	127 gr	3 000 ml	4x14 stk